

2 Halten Sie die Einschlafzeit 3 Sekunden lang gedrückt.

- Alle Anzeigen werden 3 Sekunden lang auf Display angezeigt.



- Wenn Symbol für Oberflächentemperatur weiterhin angezeigt wird und „C“ oder „F“ wird, ist das Gerät bereit für die Messung.

Hinweis:

- Bei Einschaltzeit innerhalb von 5 Sekunden wieder loggeaus, wird Symbol für Stimmtemperatur angezeigt und das Gerät wechselt in den Modus Stimmtemperatur. Schauen Sie das Gerät aus und verschauen Sie die Anzeige.

- Halten Sie das Gerät dicht an den Gegenstand, dessen Temperatur Sie messen wollen, und drücken Sie die Messstaste. Der Abstand zwischen Gerät und Gegenstand sollte 3 cm betragen.**
 - Die Messung ist nach 1 Sekunde abgeschlossen, wenn ein langer Signalton ausgegeben wird.

4 Lesen Sie das Messergebnis ab.


- Nach 1 Sekunde wird „C“, oder „F“, dann ist das Gerät bereit für die nächste Messung.
- Das Gerät schaltet nach 30 Sekunden automatisch ab, wenn keine Taste gedrückt wird.
- Setzen Sie die Sensorabdeckung nach der Messung wieder auf, um den Sensor zu schützen.

MEMO

- Beim Ausschalten kehrt das Gerät in den Modus Stimmtemperatur zurück. Die Werte der Oberflächentemperatur werden nicht gespeichert.
- Im Modus Oberflächentemperatur wird die Oberflächentemperatur des Gegenstands an die Oberflächentemperatur und die Innen Temperatur des Gegenstands unterschieden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Gefäßes Gefäßes mit einem externen Behälter nicht zu verwenden, verwenden Sie das Gerät NICHT zum Messen von Gegenständen, deren Temperatur über 100,0 °C (212,0 °F) liegt.
- In nachfolgenden Fällen kann das Risiko Messfehler zu erhöhen:
 - Die Oberflächentemperatur ist nicht nur Messung der Körperoberfläche, die im Normalbereich Körpertemperatur verursachen können.
 - Die Messung ist durch die Umgebungstemperatur nach EN 60601-1.
 - Die normale Körpertemperatur kann in verschiedenen Körperstellen variieren.
 - Die Messung ist durch die Umgebungstemperatur beeinflusst.
 - Die Messung ist durch die Umgebungstemperatur beeinflusst.
 - Die Messung ist durch die Umgebungstemperatur beeinflusst.

1. Einstellungen

- 1.1 Erstellen des Summers**
Der Summer ist standardmäßig aktiviert. Gehen Sie folgendesmaßen vor, um den Summer zu deaktivieren.
- Halten Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.**
Halten Sie die Messstaste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Einschlafstaste.

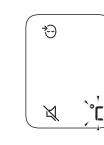

- Nachdem alle Symbole im Display angezeigt wurden, erscheint „N“ (Symbol für Nachschlafung) auf dem Display.
- Um den Summer zu aktivieren, wiederholen Sie den Vorgang „C“ oder „F“ wird angezeigt.

- Die Umgebungstemperatur wird auf 100,0 °C (212,0 °F) gesetzt.
- Die Messung ist nach 30 Sekunden automatisch ab, wenn keine Taste gedrückt wird.

- 1.2 Löschen aller Messwerte**
Wenn Sie die Messung löschen wollen, um alle auf dem Gerät gespeicherten Messungen zu löschen.

- 1.3 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint 2 kurze Pieptöne und „CLR“ blinkt.
- Wenn Sie die Taste gedrückt, drücken Sie die Einschlafstaste.



- Halten Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.4 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Das Gerät schaltet sich mit einem kurzen Piepton aus.
- Das Gerät schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus, wenn keine Taste gedrückt wird.

- 5 Wartung**
 - Beobachten Sie das Gerät auf aufgetragene Verschmutzungen.
 - Das Gerät fallen gelassen, überprüfen Sie anschließend, ob es noch ordnungsgemäß funktioniert. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

- 1.5 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.6 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.7 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.8 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.9 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.10 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.11 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.12 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.13 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.14 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.15 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.16 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.17 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.18 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.19 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.20 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.21 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.22 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.23 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.24 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

- 1.25 Drücken Sie die Einschlafstaste.**
Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie dabei mindestens 3 Sekunden lang die Einschlafstaste.

- Es erscheint ein langer Pieptöne und „CLR“ blinkt nicht mehr. Anschließend werden alle Messwerte gelöscht.

OMRON

Termometro a infrarossi frontale

Gente Temp 730 (MC-F300-E)

MANUALE DI ISTRUZIONI

All for Healthcare

1. Preparativi

2.1 Installazione/sostituzione delle batterie

3. Chiusura del coperchio del vano batterie

4. Controllare il risultato della misurazione

5. Premere il pulsante (Accensione/Spengimento)

6. Rimuovere il coperchio del vano batterie

7. Caratteristiche tecniche

8. Guida e dichiarazione del produttore

9. Manutenzione

10. Eliminazione dei rifiuti

11. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

12. Eliminazione dei rifiuti

13. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

14. Eliminazione dei rifiuti

15. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

16. Eliminazione dei rifiuti

17. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

18. Eliminazione dei rifiuti

19. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

20. Eliminazione dei rifiuti

21. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

22. Eliminazione dei rifiuti

23. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

24. Eliminazione dei rifiuti

25. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

26. Eliminazione dei rifiuti

27. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

28. Eliminazione dei rifiuti

29. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

30. Eliminazione dei rifiuti

31. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

32. Eliminazione dei rifiuti

33. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

34. Eliminazione dei rifiuti

35. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

36. Eliminazione dei rifiuti

37. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

38. Eliminazione dei rifiuti

39. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

40. Eliminazione dei rifiuti

41. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

42. Eliminazione dei rifiuti

43. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

44. Eliminazione dei rifiuti

45. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

46. Eliminazione dei rifiuti

47. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

48. Eliminazione dei rifiuti

49. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

50. Eliminazione dei rifiuti

51. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

52. Eliminazione dei rifiuti

53. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

54. Eliminazione dei rifiuti

55. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

56. Eliminazione dei rifiuti

57. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

58. Eliminazione dei rifiuti

59. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

60. Eliminazione dei rifiuti

61. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

62. Eliminazione dei rifiuti

63. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

64. Eliminazione dei rifiuti

65. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

66. Eliminazione dei rifiuti

67. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

68. Eliminazione dei rifiuti

69. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

70. Eliminazione dei rifiuti

71. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

72. Eliminazione dei rifiuti

73. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

74. Eliminazione dei rifiuti

75. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

76. Eliminazione dei rifiuti

77. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

78. Eliminazione dei rifiuti

79. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

80. Eliminazione dei rifiuti

81. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

82. Eliminazione dei rifiuti

83. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

84. Eliminazione dei rifiuti

85. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

86. Eliminazione dei rifiuti

87. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

88. Eliminazione dei rifiuti

89. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

90. Eliminazione dei rifiuti

91. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

92. Eliminazione dei rifiuti

93. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

94. Eliminazione dei rifiuti

95. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

96. Eliminazione dei rifiuti

97. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

98. Eliminazione dei rifiuti

99. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

100. Eliminazione dei rifiuti

101. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

102. Eliminazione dei rifiuti

103. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

104. Eliminazione dei rifiuti

105. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

106. Eliminazione dei rifiuti

107. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

108. Eliminazione dei rifiuti

109. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

110. Eliminazione dei rifiuti

111. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

112. Eliminazione dei rifiuti

113. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

114. Eliminazione dei rifiuti

115. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

116. Eliminazione dei rifiuti

117. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

118. Eliminazione dei rifiuti

119. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

120. Eliminazione dei rifiuti

121. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

122. Eliminazione dei rifiuti

123. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

124. Eliminazione dei rifiuti

125. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

126. Eliminazione dei rifiuti

127. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

128. Eliminazione dei rifiuti

129. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

130. Eliminazione dei rifiuti

131. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

132. Eliminazione dei rifiuti

133. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

134. Eliminazione dei rifiuti

135. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

136. Eliminazione dei rifiuti

137. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

138. Eliminazione dei rifiuti

139. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

140. Eliminazione dei rifiuti

141. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

142. Eliminazione dei rifiuti

143. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

144. Eliminazione dei rifiuti

145. Informazioni importanti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)