



# KICK THE TICK® expert - GEBRAUCHSANLEITUNG



KICK THE TICK® Zeckenentferner für die sichere Entfernung von Zecken

KICK THE TICK® Spray für das schnelle Vereisen der Zecken



## ANWENDUNG

KICK THE TICK® expert SICHERES ZECKENENTFERNUNGS-KIT ist ein Medizinprodukt zur Entfernung von Zecken aus den Körpern von Menschen und Haustieren.

Es wird empfohlen zur Verhütung von durch Zecken hervorgerufenen Krankheiten, einschließlich: Frühsommer-Meningoenzephalitis, Lyme-Borreliose, Babesiose, Anaplasmosis und andere.

## INHALT

1. WAS IST KICK THE TICK® EXPERT SICHERES ZECKENENTFERNUNGS-KIT UND WOFÜR WIRD ES GENUTZT
2. ZECKENANHAFTUNG UND ÜBERTRAGUNG VON KRANKHEITSERREGERN
3. GEBRAUCHSANLEITUNG
4. ZUSATZINFORMATIONEN
5. WARNUNGEN UND VORKEHRUNGEN
6. INHALT VON KICK THE TICK® EXPERT SICHERES ZECKENENTFERNUNGS-KIT UND ZUSAMMENSETZUNG
7. WIRKSAMKEIT
8. LAGERUNG

## VORSICHT!

Lesen Sie vor Anwendung immer die Anweisungen.  
 Nur weisungsgemäß benutzen, folgen Sie den Anweisungen.  
 Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Ihren Apotheker.  
 Bewahren Sie diese Anweisungen für den künftigen Gebrauch auf.

## 1. WAS IST KICK THE TICK® EXPERT SICHERES ZECKENENTFERNUNGS-KIT UND WOFÜR WIRD ES GENUTZT

KICK THE TICK® expert SICHERES ZECKENENTFERNUNGS-KIT wird genutzt, um erste Hilfe im Falle von Zeckenbissen zu leisten. KICK THE TICK® expert SICHERES ZECKENENTFERNUNGS-KIT enthält ein Medizinprodukt-Spray für das schnelle Vereisen der Zecken und KICK THE TICK® Zeckenentferner für das sichere Entfernen der Zecken. Das Vereisen reduziert das Risiko der Übertragung von Krankheitserregern durch die Zecken.

### WIRKUNGSWEISE:



Vereist die Zecke und stoppt Austritt des ansteckenden Speichels der Zecke während der Entfernung.



APRF™  
technology

#### APRF™ Technik (Anti-Parasiten Entfernungsfilm)

führt zur akkuraten Bedeckung des Körpers der Zecke, was davor schützt, dass die Zecke zerrissen wird und das Risiko des Kontakts mit den ansteckenden Stoffen während des Entfernens reduziert.



Enthält KICK THE TICK® Zeckenentferner für die sichere und effektive Entfernung von Zecken und reduziert zusätzlich das Risiko der Übertragung von ansteckenden Stoffen während der Entfernung der Zecke.

## 2. ZECKENANHAFTUNG UND DIE ÜBERTRAGUNG VON KRANKHEITSERREGERN

Menschen und Haustiere werden von Zecken in allen Entwicklungsstufen angegriffen. Am aggressivsten jedoch sind weibliche Zecken und Nymphen.


Zeckenbisse sind im allgemeinen schmerzlos. Eine anhaftende Zecke wird gewöhnlich zufällig entdeckt bzw. während der Untersuchung des Körpers. Zeckenbisse können überall am Körper auftreten. Normalerweise suchen Zecken nach weichen Hautregionen und werden oft in Hautfalten, im Nacken oder rund um den Haaransatz gefunden.



Ansteckende Stoffen können auf den Wirt übertragen werden sogar innerhalb der ersten Stunden nach dem Zeckenbiss.

Das Infektionsrisiko der Übertragung erhöht sich jedoch beträchtlich nach einer Anhaftung von 24 Stunden. Eine Infektion kann auch auftreten bei dem Kontakt mit Körperflüssigkeiten der Zecke oder bei einer unsachgemäßen Entfernung der Zecke.

Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, sollte die Zeckenentfernung schnellstmöglich durchgeführt werden.

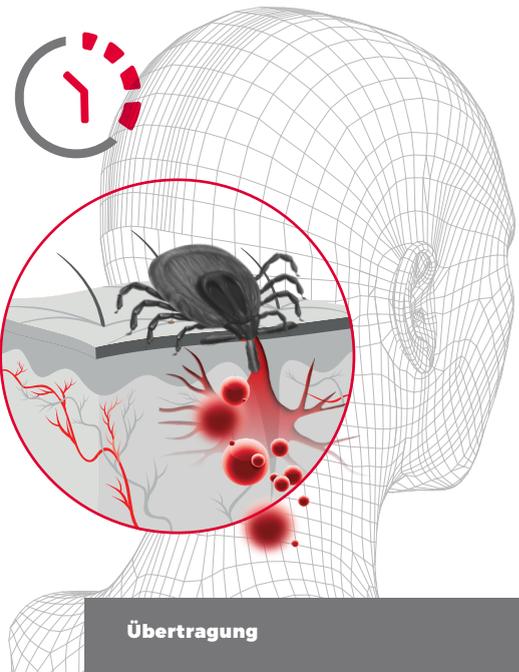

Übertragung

### 3. GEBRAUCHSANLEITUNG:

#### Schritt 1: Vereisen der anhaftenden Zecke

**1**

Lösen Sie den Zeckenentferner vom Spray-Applikator.




**2**

Entriegeln Sie den Spray-Applikator, indem Sie ihn in Uhrzeigerichtung von der Position geschlossen auf offen drehen.



**3**

Richten Sie die Sprühdüse sorgfältig auf die Zecke.

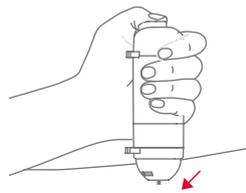

**4**

Drücken Sie den Knopf des Spray-Applikators bis zum Anschlag, um die volle Dosis des Produkts freizusetzen.




**5**

Nach der Behandlung sollte der Spray-Applikator gesichert werden, indem er von der Position offen auf geschlossen gedreht wird.



**Vor der ersten Anwendung** sollte der Spray-Applikator durch zweimaliges Drücken aktiviert werden.

**2X**

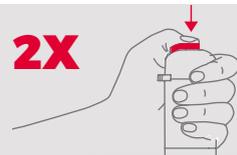

\* die Zahl der Dosen ist abhängig von der Größe der Zecke (siehe nachstehende Tabelle):

Die Larven und Nymphen des Gemeinen Holzbocks ( <i>Ixodes ricinus</i> )	weiblicher Holzbock ( <i>Ixodes ricinus</i> )	weibliche Auwaldzecke ( <i>Dermacentor reticulatus</i> )
<b>1 Dosis</b>	<b>2 Dosen</b>	<b>2 Dosen</b>
   0,8mm    1,5mm	   ~3,5mm	   ~5mm
<b>Zange A</b>	<b>Zange B</b>	

ZEIT ZWISCHEN DEN DOSIERUNGEN SOLLTE NICHT LÄNGER ALS 3 SEKUNDEN BETRAGEN.

FUNKTIONIERT ÜBERALL



#### Schritt 2: Entfernung der vereisten Zecke

Um die vereiste Zecke entsprechend der medizinischen Empfehlung zu entfernen, verwenden Sie KICK THE TICK® Zeckenentferner.


Wenden Sie das Produkt entsprechend der Anweisungen an, was die Entfernung der unbeschädigten Zecken gestattet und die Möglichkeit der Übertragung von ansteckenden Stoffen während der Entfernung reduziert.



Die Entfernung der anhaftenden Zecke sollte äußerst sorgfältig erfolgen mit Benutzung der entsprechenden Zange (A oder B). Die Wahl der Zeckenentfernungs-Zange muss der Größe der anhaftenden Zecke angepasst werden (Larve/Nympe bzw. weiblich).

**1**


Wählen Sie die geeignetste Zange des Zeckenentferners in Abhängigkeit von der Größe der Zecke. Benutzen Sie den Zeckenentferner, indem Sie die Zecke fest packen und bringen Sie den Zeckenentferner so nahe an die Haut wie möglich.

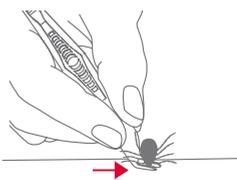

**2**


Ziehen Sie den Zeckenentferner fest nach oben.

**Nicht verdrehen!**

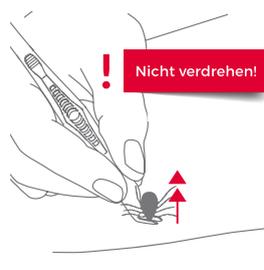


**3**

Kontrollieren Sie, ob auch nichts vom Zeckenkörper übrig geblieben ist. Desinfizieren Sie den behandelten Bereich.

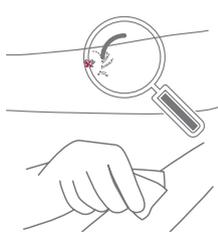

**4**

Entsorgen Sie die entfernte Zecke oder legen Sie sie in die Testtube, um Diagnostiktests durchführen zu können.

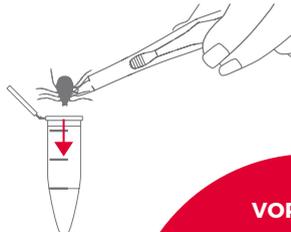

**5**

Desinfizieren Sie die zur Entfernung benutzten Geräte. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife oder desinfizieren Sie diese.



**WICHTIG!**

Unsachgemäße Behandlung kann zur Beschädigung der Zecke und zum Kontakt mit ansteckenden Stoffen führen. Um direkten Kontakt mit der Zecke zu vermeiden, wird empfohlen, Schutzhandschuhe während der Entfernung zu tragen.

**VORSICHT!**

Wenn der Zeckenbiss zu spät bemerkt wird, führt das zur permanenten Anhaftung von Teilen des Zeckenmundes, was zu einer weitaus schwierigeren Entfernung führt. Die in der Haut verbliebenen Zeckenteile sollten vom Arzt entfernt werden.



#### 4. ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Wenn sich die Zecke in einem schwer zugänglichen Bereich befindet wie Achselhöhle, hinter den Ohren oder in der Leistengegend, sollten Sie jemanden bitten, Ihnen bei der Entfernung zu helfen.

Nach der Entfernung der Zecke beobachten Sie den behandelten Bereich mehrere Wochen. Das Auftreten von örtlicher oder allgemeiner Entzündung kann mit der Übertragung von ansteckenden Stoffen durch den Parasiten zusammenhängen. Sollten Sie sich unwohl fühlen, Fieber bekommen oder sollte eine Hautrötung auftreten, so ist das charakteristisch für eine Lyme-Borreliose, und Sie sollten sofort Ihren Arzt oder Apotheker konsultieren.

#### 5. WARNUNGEN UND VORKEHRUNGEN

- + Anwendung nur weisungsgemäß, folgen Sie den Anweisungen.
- + Nicht anwenden bei Kindern unter 3 Jahren.
- + Anwendung bei Kindern nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen.
- + Nicht anwenden bei Hautverletzungen.
- + Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile sind.
- + Kontakt mit den Augen oder dem Mundinneren, der Nase oder Kehle und Intimbereichen vermeiden.
- + Nicht inhalieren.
- + Hohe Dosierungen können Rötung hervorrufen. In diesem Fall stoppen Sie sofort die Anwendung dieses Medizinprodukts und spülen die Haut mit reichlich warmem Wasser (nicht heiß!) und lassen sie trocknen.
- + Im Fall von hartnäckigen Hautveränderungen (Ausbleichen oder Rötung, Schwellung, Schmerzen) sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
- + Nur für den äußeren Gebrauch.

#### 6. INHALT VON KICK THE TICK® EXPERT SICHERES ZECKENENTFERNUNGS-KIT UND ZUSAMMENSETZUNG

- + KICK THE TICK® Spray für das schnelle Vereisen der Zecke: Isohexadecane, Isopropyl Myristate, 1,3,3,3-tetrafluoropropene, 1,1,1,2-tetrafluoroethane.
- + KICK THE TICK® Zeckenentferner für die sichere Entfernung von Zecken
- + Testtube

[WWW.KICKTHETICK.EU](http://WWW.KICKTHETICK.EU)

#### 7. WIRKSAMKEIT DES KICK THE TICK® SPRAY FÜR DIE SCHNELLE VEREISUNG DER ZECKEN

Das Medizinprodukt KICK THE TICK® enthält **60 Dosierungen**, die ein sicheres Entfernen von ungefähr **40 Zecken** gestatten.

#### 8. LAGERUNG

Aufbewahrung nur im Originalbehälter, außerhalb der Reichweite von Kindern, bei einer Temperatur von unter 40°C.

**VORSICHT** Das Kit enthält einen unter Druck stehenden Behälter: kann bei Hitze explodieren. Fern halten von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Entzündungsquellen. Nicht einstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenlicht schützen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### HERSTELLER

ICB Pharma  
Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna  
6a Moździerzowców Street, 43-602 Jaworzno, Polen



#### VERTRIEB

mevita Handels GmbH,  
Maienbergsstraße 10-12, 15562 Rüdersdorf, Deutschland.  
Tel.: 033638/749-21

